



1943'den Günümüze; Güvenilir, Gerçek Kalite

Epica

CERRAHI ÜNİT



DIŞ HEKİMLİĞİ CİHAZLARI





Alet koyma yeri üzerindeki silikon örtü kolayca çıkarılıp temizlenebilir, otoklavda sterilize edilebilir.



OPSİYONEL
Hijyenik çalışma ortamı için tüm çıkış hortumları kolayca çıkarılıp, otoklavda sterilize edilebilir.



OPSİYONEL
Box'a monte Saf su deposu

Pnömatik pedal
Chip Blower sistemli,
su spray kumandalı



Diverso Box'ın kumanda panelinden elektrikli mikromotor hız ve dönüş yönü seçimi yapmak, 3 farklı hız ve yön seçimi programlamak mümkündür.



Estetik ve ergonomik Diverso Box askılı sistem 5 çıkışlı olarak hazırlanmıştır.

Tük çıkışlar istenilen özelliklere göre kumanda edilir.

Her çıkışa ayrı-ayrı kumanda eden su ve hava regülatörleri vardır.

Opsiyonel koltuk kumandası eklenebilir.

OPSİYONEL

Cerrahi müdahaleler için serum mikromotor ve anguldurvalarına bağlama imkanı



OPSİYONEL
Silikon örtülü
Büyük alet koyma tepsisi



İkisi monojet cerrahi aspiratör olmak üzere 4 çıkışla donatılan Support Kol'da diğer çıkışlar hekimin isteğine göre düzenlenir.

Hijyen açısından faydalı ve solüsyonlardan daha az etkilenmeyi sağlayan şeffaf koruma rahatlıkla takılıp çıkarılabilir ve otoklava girebilir.



Kendi ekseninde dönebilen 4 çıkışlı Support Kol, hekimin rahatça çalışabilmesi için tasarlanmıştır.

Kumanda panelinden koltuk hareketleri, kraşuar ve bardaklık fonksiyonları kumanda edilebilir.




Kraşuar ve bardaklık borularının inox olması sayesinde paslanma soyulma gibi sorunlar yaşanmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kolayca yerinden çıkarılıp otoklavda sterilize edilebilir.



Aspiratör filtreleri ve hortumları kolayca çıkarılıp temizlenebilir.

Epica Cerrahi Ünit'in kraşuar bölümü tamamı seramikten, hijyen koşullarına uygun, kolayca temizlenebilir biçimde yapılmıştır. Hasta konforu için kendi ekseninde sağa ve sola hareketlidir

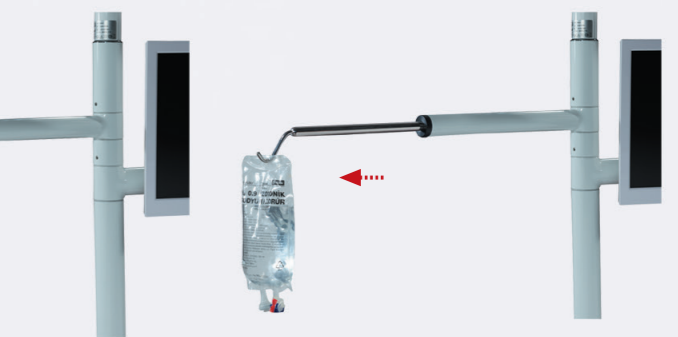

Serum askı kolu gerektiğinde uzatılabilir.



Faro
Alya



Faro
Maia



Faro
Edi



G. Comm
Vision

Epica Cerrahi Ünit'in reflektörü hekimin talebine göre düzenlenir. Opsiyonel olarak fotoselli, LED'li, oynar kafa sistem kullanılabilir.




Hareketli
Ünit Gövdesi

Epica

CERRAHI ÜNİT



Hasta konforu düşünülerek ergonomik olarak tasarlanan Elegant Fotöy, hareketli sırt ve yatak bölümüyle hekime istediği çalışma pozisyonu sağlar

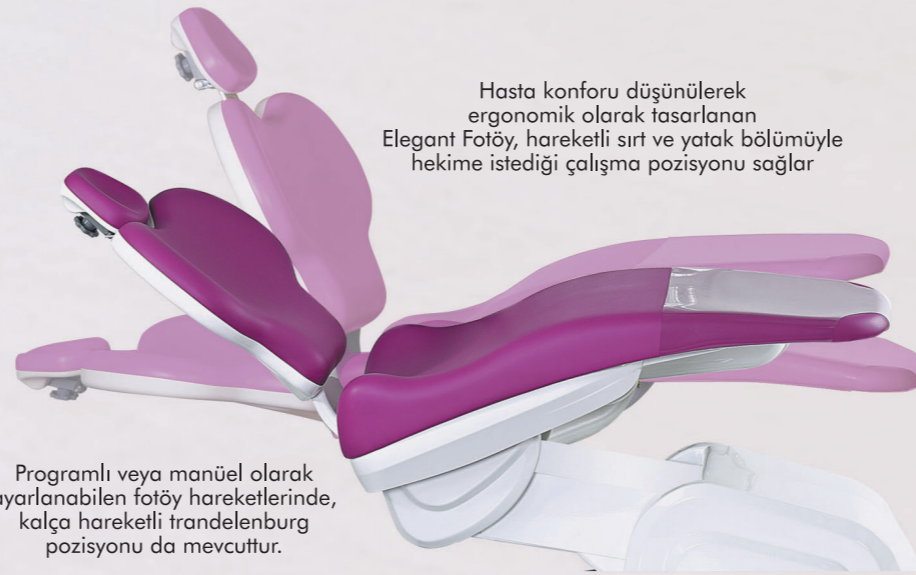

Programlı veya manüel olarak ayarlanabilen fotöy hareketlerinde, kalça hareketli trandelenburg pozisyonu da mevcuttur.


Elektrikli – Pnömatik ve koltuk kumandalı pedal (Chip Blower Sistemi)



Pnömatik pedal Chip Blower sistemli, su spray kumandalı



Sırt dayama bölümü yukarı - aşağı ve ileri geri hareketlidir. İstenilen pozisyona sabitleme imkanı sunar.

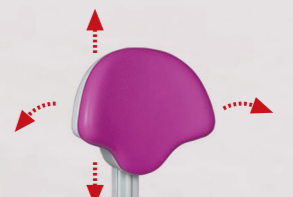

Çok fonksiyonlu krom ayaklı ayak koyma çemberli hekim taburesi.



Tekerlekleri otomatik frenlidir.



Yumuşak döşeme seçeneği



Dar yada geniş koltuk sırtı seçimi



Ünit tabanına sabitlenebilen kumanda, ağız içi çalışma sırasında hekime koltuk hareketlerini ayakta kumanda ile değiştirme imkanı sunar.



Hastanın kolayca oturup kalkması için hareketli sağ kol eklenebilir.




Krom ayaklı, ayak koyma çemberli Hekim Taburesi



Çalışma ergonomisi için özel olarak dizayn edilmiş; Semer şeklinde, ayak koyma çemberli Tabure.



Tekerlekleri otomatik frenlidir.

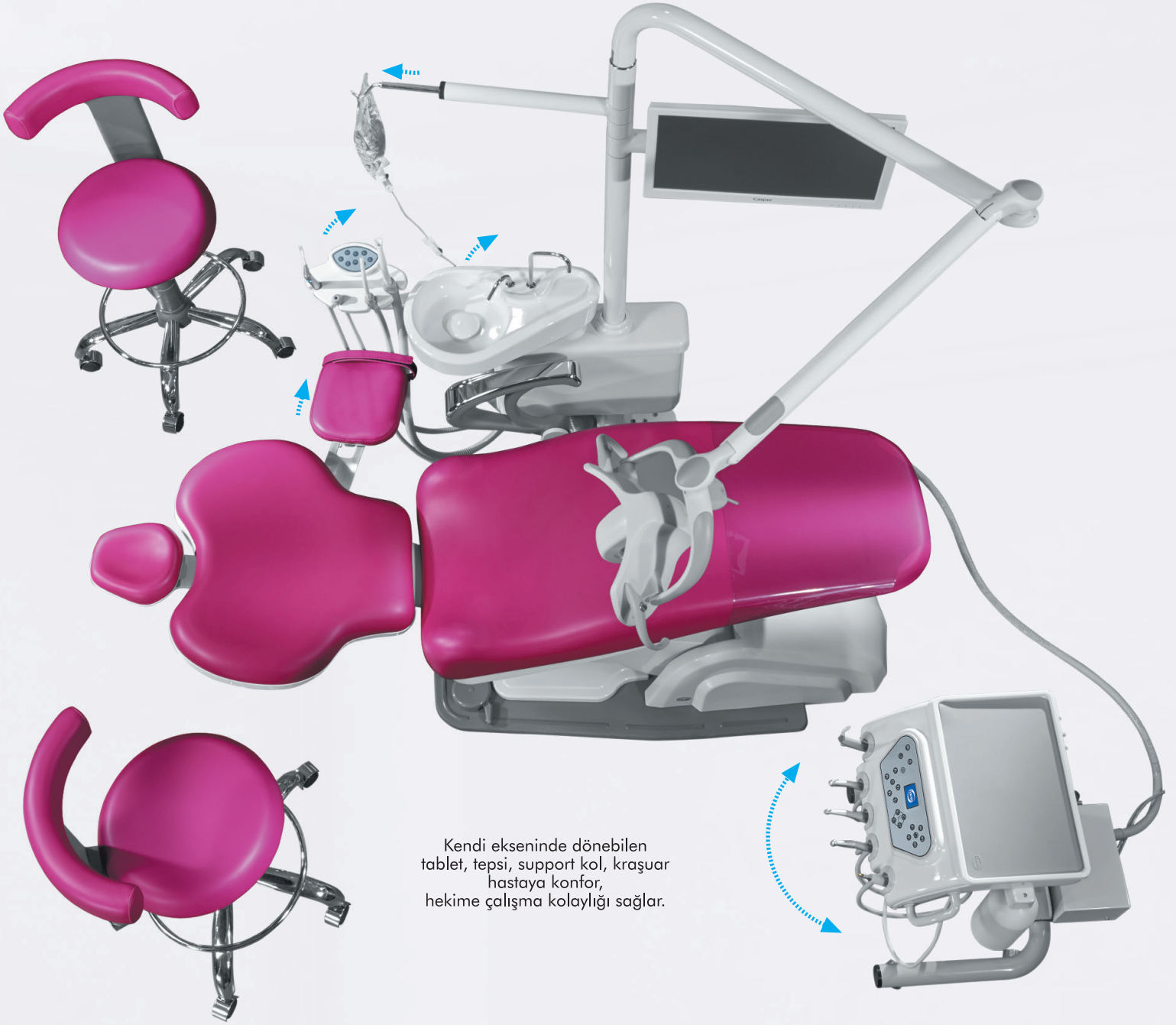

Kendi ekseninde dönebilen
tablet, tepsi, support kol, krasuar
hastaya konfor,
hekime çalışma kolaylığı sağlar.



Planet Tetiyer ile
multi axis
hareket imkanı.

EN ISO 9001
EN ISO 13485
MDD 94/42/EEC

CE 1984



DIŞ HEKİMLİĞİ CİHAZLARI

📍 İnönü Mahallesi Çayır Sokak No.43 Harbiye-Şişli-İstanbul/ TURKEY



+90 212 233 7837



+90 212 231 7277



satis@tekmil.com.tr

230 4986



+90 545 96367 26



www.tekmil.com.tr