



*1943'den Günümüze;
Güvenilir,
Gerçek Kalite*

DENTAL UNIT
Epica



**DIŞ HEKİMLİĞİ
CİHAZLARI**



Epica Ünit reflektörü hekimin talebine göre düzenlenir. Opsiyonel olarak fotoselli, Led'li, Oynar kafa sistem kullanılabilir.



Su deposu ünit kısımdan kolayca çıkarılarak, dolumu veya temizliği yapılabilir



Epica Ünit'in kullanım suyu hekimin isteğine göre, tek düğmeyle steril su deposundan veya sebeye suyundan sağlanabilir.



Aspiratör filtreleri de kolayca sökülüp temizlenebilir.

DENTAL UNIT *Epica*



Ünit tabanına sabitlenen kumanda, ağız içi çalışma sırasında hekime koltuk hareketlerini ayakta kumanda ile değiştirme imkanı sunar.



Elektrikli - Pnömatik ve koltuk kumandalı pedal (Chip Blower sistemli)



Standart

Opsiyonel

Pnömatik pedal Chip Blower sistemli, Su spray kumandalı

Arkalıksız, ayak koyma çemberli hekim taburesi



Sırt dayama bölümü yukarı - aşağı ve ileri - geri hareketlidir. İstenilen pozisyonda sabitlenir.




Çok fonksiyonlu krom ayaklı, ayak koyma çemberli hekim taburesi



Krom ayaklı, ayak koyma çemberli hekim taburesi

Hasta konforu düşünülerek ergonomik olarak tasarlanan Elegant Fotöy, hareketli sırt ve yatak bölümüyle hekime istediği çalışma pozisyonunu sağlar.

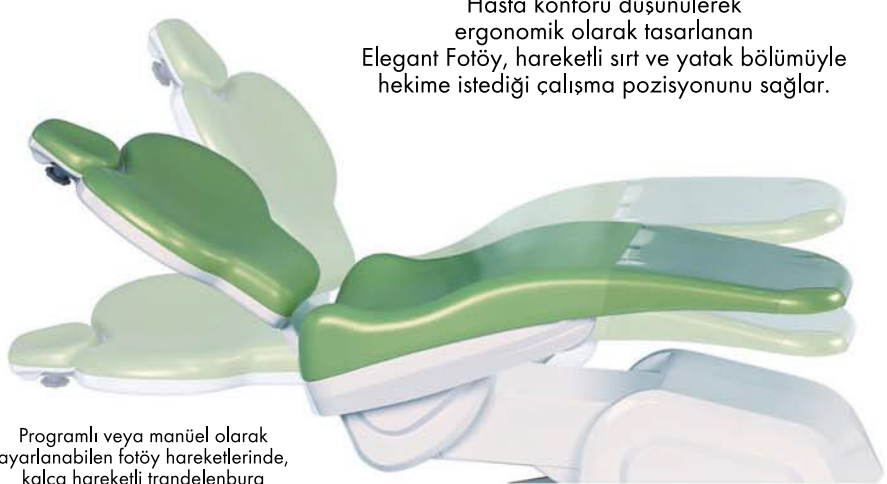

Programlı veya manüel olarak ayarlanabilen fotöy hareketlerinde, kalca hareketli trandelenburg pozisyonu da mevcuttur.

Hastanın kolayca oturup kalkması için, hareketli sağ kol eklenmiştir





Mıknatıslı alet koyma yeri, kolayca yerinden çıkarılıp temizlenebilir. Silikon örtüsü otoklavda sterilize edilebilir.



Kumanda üzerindeki silikon örtü kolayca çıkarılıp otoklavda sterilize edilebilir.

Epica Tablet kamçı sistemi 5 çıkışlı olarak hazırlanmıştır. Tüm çıkışlar istenilen alete göre dizayn edilir. Her çıkışın ayrı-ayrı kumanda edilen su ve hava regülatörü vardır. Pnömatik kilitleme sistemi tabletin istenilen seviyede durmasını sağlar.


Standart Kumanda Paneli ile Reflektör, Negatoskop, Krasuar, Bardaklık fonksiyonlarına ve Koltuk pozisyonlarına ayrı-ayrı olarak kumanda etmek mümkündür.

Epica Ünit'in krasuar bölümü tamamı seramikten, hijyenik koşullara uygun, kolayca temizlenebilecek biçimde yapılmıştır. Hasta konforu için kendi ekseninde sağa ve sola hareketlidir.


Kendi ekseninde dönebilen 4 çıkışlı Support Kol, hekimin rahatça çalışabilmesi için tasarlanmıştır. Kumanda panelinden koltuk hareketleri, krasuar ve bardaklık fonksiyonları kontrol edilebilir.

2'si monojet cerrahi aspiratör olmak üzere 4 çıkışla donatılan Support Kol'da diğer çıkışlar hekimin isteğine göre düzenlenir.

Standart Kumanda Fonksiyonları

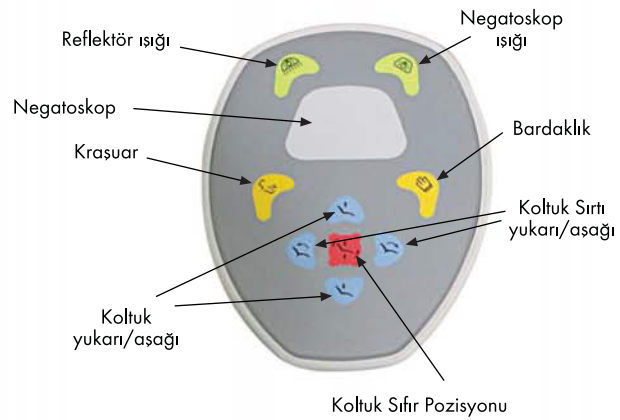

Programlı Kumanda Fonksiyonları

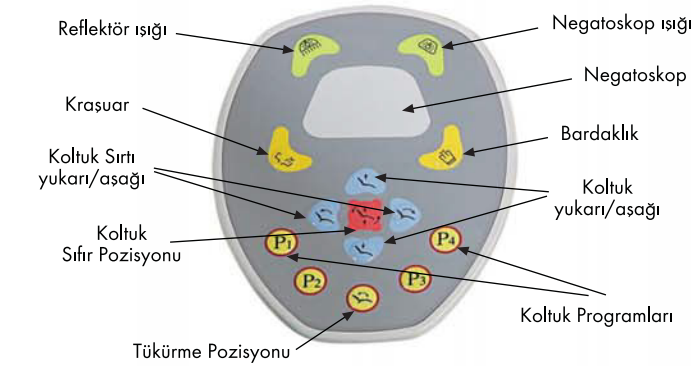


Epica'nın Programlı Kumanda Paneli ile 4 ayrı koltuk pozisyonu programlanabilir. Tek düğme ile tükürme pozisyona gelmek, sonrasında çalışılan pozisyonuna dönmek mümkündür.

Silikon örtü kolayca çıkarılıp temizlenebilir, otoklavda sterilize edilebilir.

Krasuar ve bardaklık çıkışları kolayca sökülüp temizlenebilen paslanmaz malzemeden üretilmiştir.



Kendi ekseninde dönebilen
tablet, tepsi,
support kol, krasuvar
hastaya konfor,
hekime çalışma
kolaylığı sağlar.

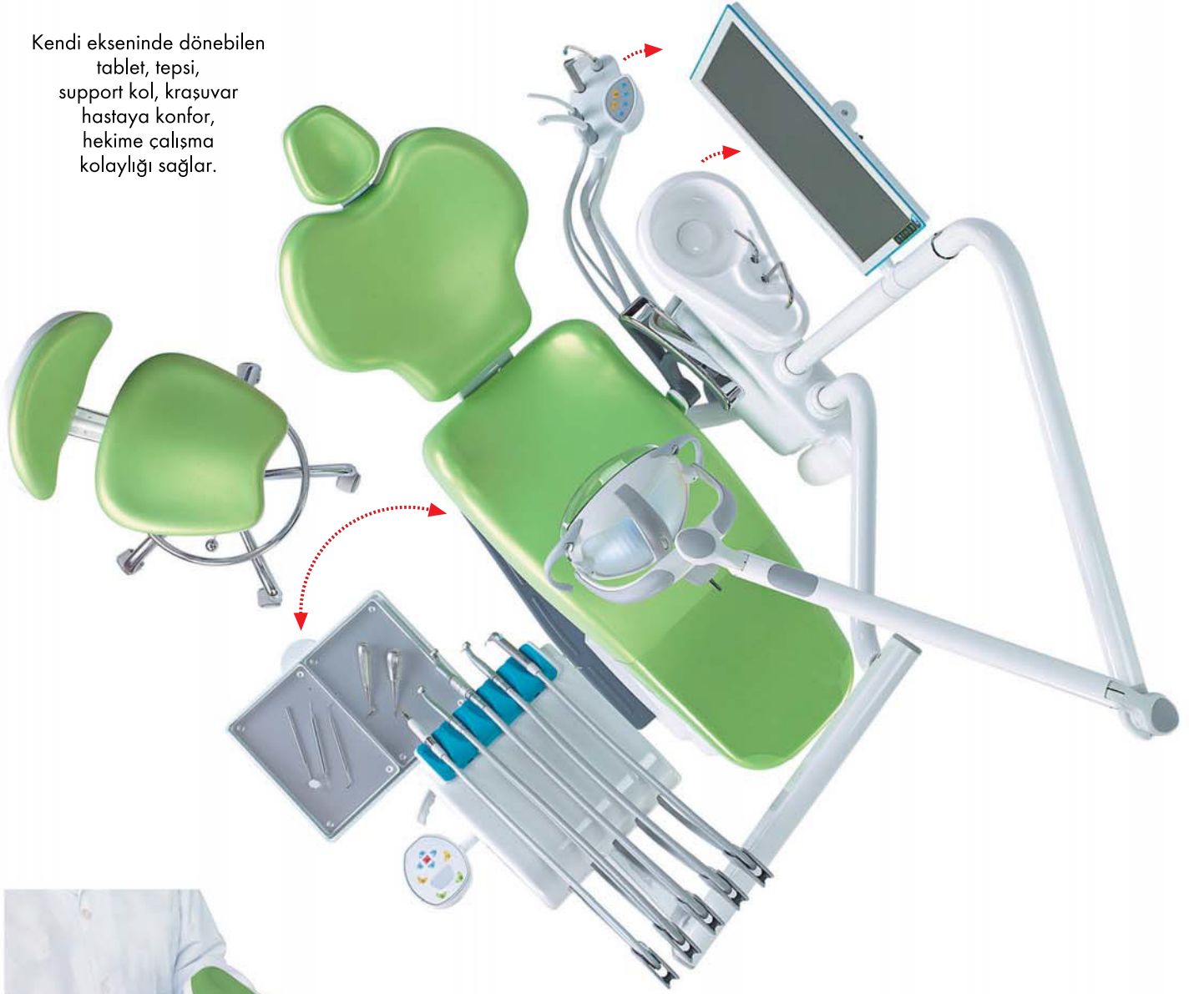

Planet Tetiyer ile
multi axis
hareket imkanı



Çift fonksiyonlu
tasarımı sayesinde,
tetiyer kolayca hastanın
en rahat olacağı
konuma getirilir.
Engelli hastalar için de
kullanımı mümkündür.



TEKMİL SANAYİ MÜESSESİ

Certified by :



DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN ISO 13485:2003
Medical Devices Directives 93-42

CE 1984



TS ISO 7494
Diş Üniteleri
ARALIK 1995



DIŞ HEKİMLİĞİ CİHAZLARI

TEKMİL DIŞ HEKİMLİĞİ VE TIBBİ CİHAZLAR ÜRETİM
İÇ VE DIŞ TİCARET A. Ş.

İnönü Mahallesi Çayır Sokak No.43 Harbiye-Şişli-İstanbul/ TURKEY

+90 212 233 7837
230 4986

+90 212 231 7277
+90 545 96367 26

satis@tekmil.com.tr
www.tekmil.com.tr